

UnoMeter Abdo-Pressure abdominale druk monitorsysteem

Productinformatie

UnoMeter Abso-Pressure, abdominale druk monitorsysteem; voor het bepalen van de intra-abdominale hypertensie.


Het UnoMeter Abdo-Pressure IAP (Intra-Abdominale Hypertensie) monitoringsysteem is een steriel wegwerpinstrument dat wordt gebruikt voor de monitoring van de intra-abdominale (binnen de buikholte) druk bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze monitoring vindt plaats via de blaas. Intra-abdominale hypertensie (IAH: IAP > 12 mmHg) treedt op bij meer dan 50% van alle chirurgische en medische ICU-patiënten. Preventie en vroegtijdige ontdekking van deze aandoening is van cruciaal belang om patiënten te beschermen tegen de levensbedreigende gevolgen, zoals abdominaal compartimentsyndroom. Het kan worden gebruikt met elk gangbaar urinemeetsysteem.

Elke IAP-bepaling kost minder dan 10 seconden. De meting wordt mogelijk gemaakt door een manometrische buis van 20 ml die is uitgerust met een biologisch filter dat tussen de Foley-katheter en de set wordt geplaatst voor urineverzameling per uur. Het systeem is voorzien van een eenvoudig af te lezen schaalverdeling in mmHg.

De het monitorsysteem bevat een naaldevrije samplepoort.

Specificatie:

- abdominale druk monitorsysteem
- schaalverdeling in mmHg
- steriel
- disposable

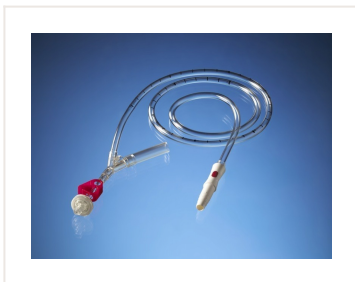

Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067705	Unometer Abdo-pressure Stand Alone 509936 Steriel	20 st.	480 st.	