

seca 959 stoelweegschaal 300 kg digitaal





Productinformatie

seca, stoelweegschaal; voor het wegen van het lichaamsgewicht en het berekenen van BMI bij een patiënt in een zittende positie.

Weegschaal in de vorm van een stoel met digitaal display. en wieltjes aan de onderzijde. Aan de onderzijde is de weegschaal voorzien van wieltjes, zodat de weegschaal verplaatsbaar is. De HOLD knop stelt de gebruiker in staat een gemeten gewicht kort op te slaan om het later te bekijken. Via het draadloze netwerk seca 360° wireless kunnen de meetresultaten draadloos aan een seca afstandsprinter of een met de software seca analytics 105 software en de seca 360° wireless USB adapter 456 uitgeruste pc worden overgedragen. Met de TARE functie kan er extra gewicht (bijv. een handdoek) op de weegschaal geplaatst worden en vervolgens (na de weging) dit extra gewicht worden ingehouden op het totaal. Verder kan met de weegschaal ook het BMI berekend worden. Geleverd met opbergtas voor de adapter en oplaadbare batterijen.

Specificatie:

- digitale stoelweegschaal
- wieltjes aan onderzijde
- HOLD functie
- seca 360° wireless
- TARE functie
- BMI berekenen
- weegbereik: tot 300 kg
- graduatie: 50 g <150 kg, 100 g < 250 kg, 200 g > 250 kg
- afmeting: 81 cmx 56.5 cmx92 cm
- gewicht: 24.5 kg

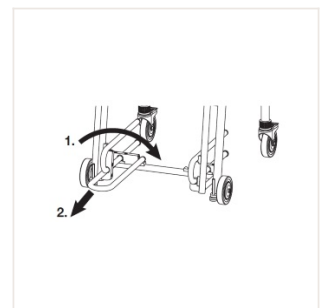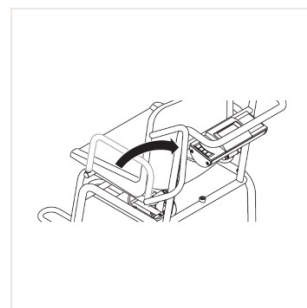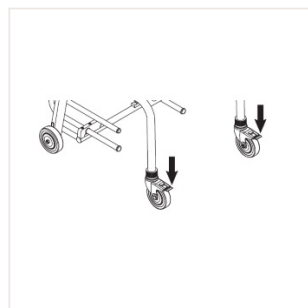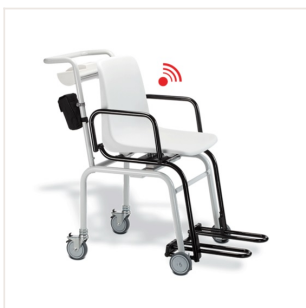

Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	----------------	--------------	------------	------------	-----------